

# KATALOG

Medikal Sağlık Teknolojileri

Showroom

İzmir İstanbul Kıbrıs

*“We Are Everywhere”*  
Sloganı ile 15 Yıllık Tecrübe.

Medikal estetik alanında hizmet vermekte olan Medsatek Medikal Sağlık Teknolojileri; yeniliği ilke edinerek, dünyada kabul görmüş son teknolojiyi sunmaktadır. Yüksek standartlarda, en iyi hizmet anlayışı ile sektörün profesyonellerine ulaştırmaktadır. Geleceği bugünden yakalayan vizyonuyla yeni markalar yaratarak hizmet alanını ve ürün yelpazesini genişletmektedir. Sektöre gelişim ve katkı sağlayabilecek projeleri, firmaları desteklemekle birlikte yurt içinde düzenlenen fuar, kongre ve sempozyumlarda sektörel gelişim anlamında katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

**FALCON**ice  
Diode Laser Technology

# Lazer Epilasyonda Performans ve Kalitenin Simgesi

Bugüne kadar Medikal Estetik alanında lazer epilasyon uygulamalarında **etkin, hızlı, acısız, güvenli ve kalıcı** bir tedavi arzulanmıştır. Bu konuda memnuniyet sağlayan güçlü bir teknoloji ve donanıma sahip olan Falcon Ice Türkiye pazarında **MEDSATEK** distribütörlüğünde faaliyet göstermektedir.



## Diode Lazer Teknolojisi

Falcon Diode Lazer Teknolojisi yapmış olduğu histolojik analizler neticesinde 6 seanslık tedavi sonrası uygulama yapılan bölgeler laboratuvar ortamında dijital kamera (DP70 Olympus Germany) ile incelenmiş ve **kıl yoğunluğunun yaklaşık %85.21 oranında azaldığı klinik sonuçlar ile tespit edilmiştir.**


Seans	Joule/cm <sup>2</sup>	Hz	Kıl Kökünde Azalma
1	5	5	%70.23
2	5	5	%74.14
3	6	5	%78.51
4	6	5	%82.11
5	6	5	%83.13
6	6	5	%85.21

(Leipzig Üniversitesi Dermatoloji ve Algoloji Departmanı)

- -20° Buz Başlık
- İlk Seansta %70 Dökülme
- Kıl kökünü besleyen kılcıl damarlara yüksek tahribat
- En ince kıl yapısında bile etkili çözüm



Design in  
Korea.

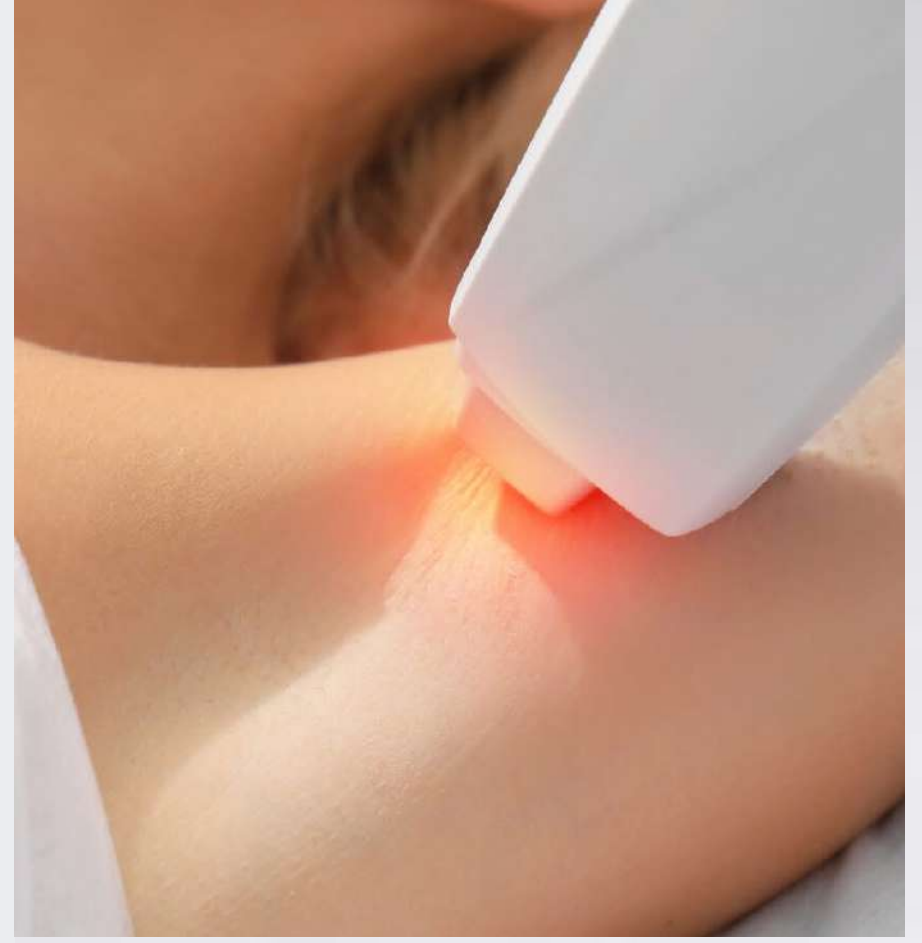

Lazer Tipi	Diode Lazer
Dalga Boyu	808nm
Lazer Bar Gücü	1200W (2025 Edition)
Atış Hızı	1-20 Hz
Işığın kalma Süresi	1-350 Hz
Soğutma Sistemi	RCCS + Hava + Su
Mercek Boyu	1,2 cm <sup>2</sup>
Güç(Giriş Power)	6000W (2025 Edition)
Ekran	14.65 inc
Lazer Kaynak	Makro Bar
Atış Garantisi	50 Milyon / 2 Yıl



**4FALCON**<sup>PRO</sup>  
Diode Laser Technology

# Prestij ve Güç Sahibi İşletmeler için...

Yeni nesil teknoloji ve donanıma sahip olan Falcon 4 Pro, Diode Lazer alanında 4 farklı dalga boyunu bir aplikatörde birleştirerek, farklı doku derinliklerini ve farklı anatomik yapılarda ki kıl tiplerini hedef alarak en etkili ve kalıcı lazer epilasyon deneyimini sunar.



## 4D Diode Lazer Teknolojisi


Falcon 4 Pro, Lazer Epilasyon uygulamalarında yeni bir dönem açan 4D yeni teknolojisi ile sektörün profesyonellerine sonuç odaklı çözüm sunan en yeni lazer epilasyon teknolojisidir.

Falcon 4 Pro yeni teknolojisi ile ilk seansta **%70 dökülme oranı** ile yüksek müşteri memnuniyeti oluşturur.




### 4 EŞ ZAMANLI DALGA BOYU

- Diode Lazer
- ND:YAG
- 940 NM
- 755 NM

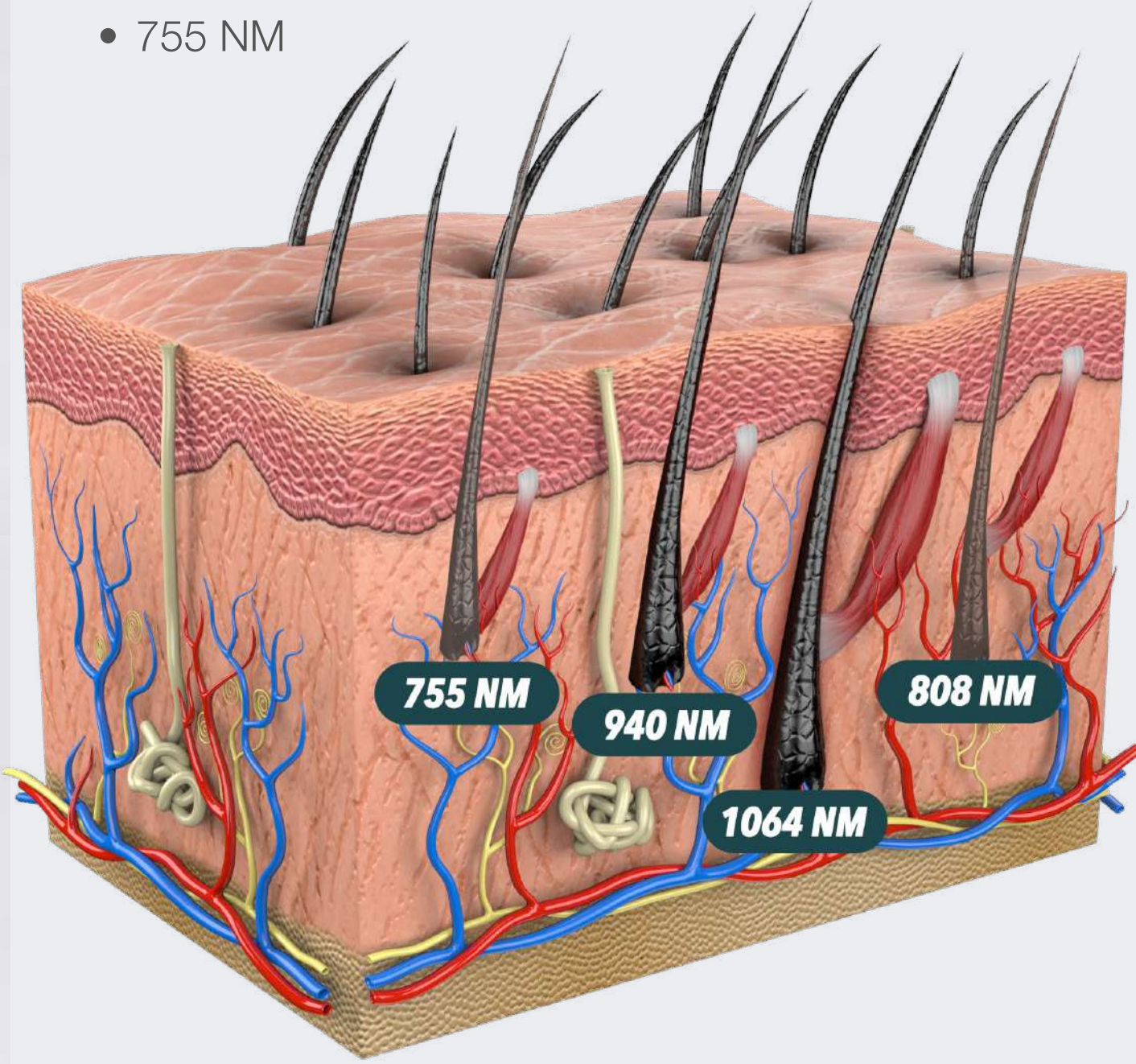

Design in  
Korea.

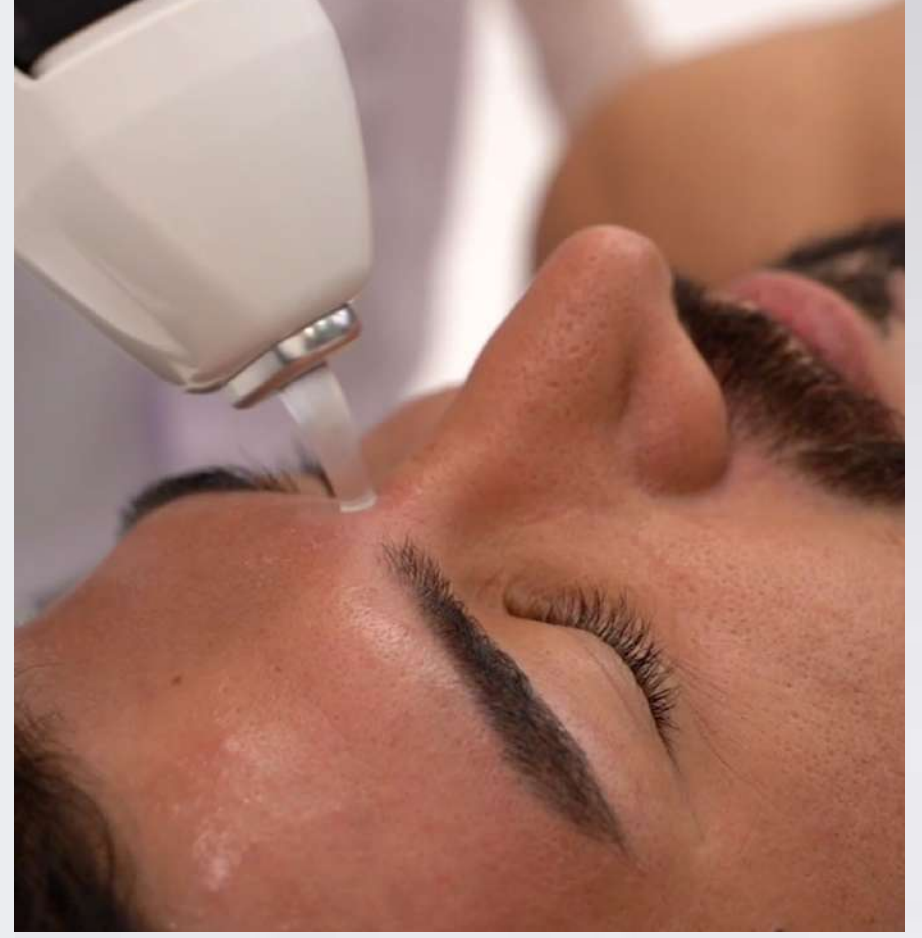

Özel kalem atış aparatıyla en küçük alanlarda bile etkili sonuçlar.

Lazer Tipi	4D Diode Lazer
Dalga Boyu	755nm + 808nm+ 940nm+1064nm
Lazer Bar Gücü	2400W (2025 Edition)
Atış Hızı	1-20 Hz
Işığın kalma Süresi	1-600 Hz
Soğutma Sistemi	Semiconductor thermostatic refrigerator + Sapphire cooling +Hava + Su
Mercek Boyu	4 cm <sup>2</sup>
Güç(Giriş Power)	7800 W (2025 Edition)
Ekran	15.4 inc / 4K
Lazer Kaynak	Makro Bar
Atış Garantisi	100 Milyon / 2 Yıl



# Cilt Bakım ve Yenileme

Showroom

İzmir

İstanbul

Kıbrıs

 Hydra  
ProClean

# Cildin İhtiyacı olan Her şey için...

Amerika'da yılın cilt yenileme teknolojisi olarak seçilmiş cilt bakım uygulamalarındaki en etkili ve başarılı sonuçları veren cilt temizleme uygulamalarından biridir. İçeriğindeki farklı başlıklar ile birçok temel cilt bakım işlemini başarıyla sağlar.



## Profesyonel Cilt Yenileme

Hydra Proclean cilt bakımında en çok tercih edilen uygulama başlıklarını bir araya getiren cilt bakım cihazıdır.

- Gözle görülmeyen kalıntılarda bile derinlemesine temizlik sağlar.
- Güneş lekeleri üzerinde etkilidir.
- Siyah nokta tedavisinde kullanılır.
- İnce çizgiler ve kırışıklıklar üzerinde etkilidir.
- Akneli ve yağlı ciltler üzerinde etkilidir.
- Gözenek sıkılaştırır ve cilt tonunu düzenler.



Hassas vakum teknolojisi sayesinde acısız bir uygulama ile etkili sonuçlar elde edilir.

Toplam 9 Başlık Bulunmaktadır.




Hydra  
Dermabrazyon



Elmas  
Dermabrazyon



Eye  
Ultrasound

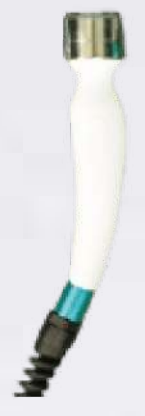

Facial  
Ultrasound



Mikro Akım  
Biolift



Oksijet



Yüksek  
Frekans



Scrubber



Led  
Tedavi



Vakum Kalemi



Hydra  
ProClean+

# Kameralı Analiz Derin Temizlik...

HydraProClean+'ın kameralı başlığıyla cilt altını keşfedin. Derinlemesine analiz, kişiye özel temizlik ve maksimum etki bir arada. Her cilt farklıdır, her çözüm de öyle olmalı. HydraProClean+ ile cilt bakımını önce analiz ediyor, sonra mükemmelleştiriyoruz.



## Profesyonel Cilt Yenileme

### Hydradermabrazyon

Özel serumlar yardımı ile cilt temizliği yapılır. Cildin nem dengesini sağladıktan sonra dermabrazyon işlemi ile kontrollü aşındırma ve epidermisi temizleyip dermiste olumlu uyarım yapma prensibiyle çalışır.

### Rf-Eye

Göz çevresindeki ince kırışıklıkları ve kaz ayaklarını gidermeyi sağlar.

### V-Face

Isı ile gençleşmeyi sağlayıp RF dalgaları ile cildi toparlar, ince kırışıklıkları açmayı sağlar.

### Sprey Tabancası

Cildin nem miktarını arttırarak cilde sağlıklı ve parlak bir görünüm sağlanır.

### Plazma Handle

Akneleri kurutup, gözenekleri sıkılaştırır. Cilde yoğun miktarda ozon vererek besler, tazeler ve hücre yenilenmesi sağlar.

### Kamera Başlığı

Cilt analizi özellikli kameralı başlığı sayesinde cilt yüzeyi ve cilt altındaki durumu detaylı bir şekilde görüp tedaviyi ona göre yönlendirmeyi sağlar.

### Soğutucu Başlık

Gözenekleri küçültür, cildi sıkılaştırır, kırışıklıkları giderir, kolajen hiperplazisini teşvik eder, kızarıklığı ve duyarlılığı ortadan kaldırır.

### Ultrasonic

Tedavi bölgesine gönderilen bu ses dalgaları cilt yüzeyinde vibrasyon oluşturarak epidermisen ölü hücrelerden, siyah noktalardan ve sebum gibi çeşitli sorunlardan temizlenmesi sağlanmaktadır.

### Water Jet

Cilde yoğun miktarda oksijen vererek onarım sağlar.

### Led Maske

Doğal hidrasyonun artışa geçmesine yardımcı olur. Hem cilt dokusunda hem de tonunda iyileşme meydana getirir. Güneş kaynaklı zarar görmüş cildi iyileştirir. Sıkı ve genç bir cilt görünümünü meydana getirir.



Hydra  
Dermabrazyon



Water  
Jet



Cold  
Hammer



Ultrasound  
Başlık



RF Eye




V-Face



Plazma  
Handle



Oksijet

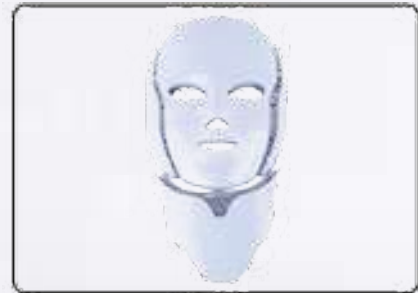

Led  
Maske



Analiz  
Kamerası

Hydra  
NewClean

# Ergonomik, işlevsel ve Performans

Ergonomik yapısı sayesinde hafif ve pratik bir kullanım sunar. İşlevsel tasarımıyla güçlü performansı bir araya getirir.



## Profesyonel Cilt Yenileme

### HydraFacial Başlığı

Özel serumlar yardımı ile cilt temizliği yapılır. Cildin nem dengesini sağladıktan sonra dermabrazyon işlemi ile kontrollü aşındırma ve epidermisi temizleyip dermiste olumlu uyarım yapma prensibiyle çalışır.

### Scrubber

Yüzeydeki kir ve ölü hücreleri nazikçe temizler.

### Ice Hammer

Cildi serinletip rahatlatmaya yardımcı olur.

### Radyo Frekans

Cildin daha sıkı ve toparlanmış görünmesini destekler.

### Ultrasound Başlık

Tedavi bölgesine gönderilen bu ses dalgaları cilt yüzeyinde vibrasyon oluşturarak epidermisen ölü hücrelerden, siyah noktalardan ve sebum gibi çeşitli sorunlardan temizlenmesi sağlanmaktadır.

### Sprey Tabancası

Cildin nem miktarını arttırarak cilde sağlıklı ve parlak bir görünüm sağlar.



Hydra  
Facial Başlığı



Scrubber



Ice  
Hammer



Radyo Frekans



Ultrasound  
Başlık



Sprey Başlık

**FacePod**  
Switzerland



İsviçre CE  
Güvencesi ile

# Manyetik İnfüzyon ile Estetik Yeniden Tanımlanıyor

FacePod, manyetik infüzyon teknolojisiyle özel formüle edilmiş pod içeriklerini dermis tabakasına kadar ileterek cilt problemlerini hedef alır ve sağlıklı, yenilenmiş bir cilt sağlar.



## Manyetik İnfüzyon

Manyetik infüzyon teknolojisi; probleminize uygun kapsül ile cildin bütün katmanlarına nüfuz etmesini sağlayarak cildi hızlı ve etkili bir şekilde tedavi eder.

FacePod, parlak ve esnek bir cilt için dengeli sebum kontrolü, eşit pigmentasyon, derin nemlendirme ve gelişmiş cilt onarımı sunar.



Sebum Dengeleyici

clearvais



Pigmentasyon Eşitleyici

evenex




Yoğun Nemlendirici

hydrade



Anti Aging ve Güçlendirme

vitali boost

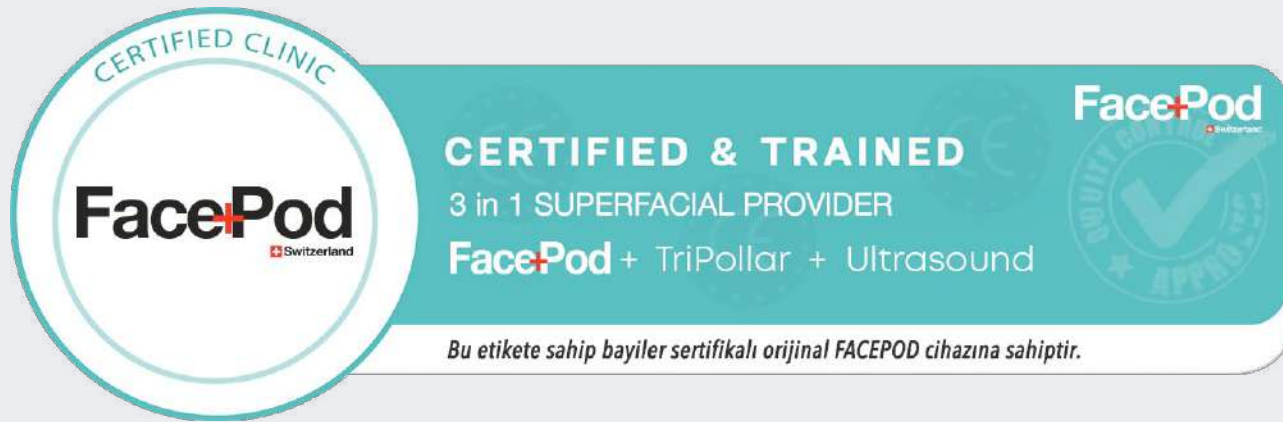

### Uygulama Alanları

- Cilt lekeleri
- Akne
- Nem oranı artırma
- Sebum dengeleyici
- Kırışıklıklar
- Cilt tonu eşitsizlikleri
- Cilt Bariyerini Güçlendirme
- Anti Aging
- Pigmentasyon Problemleri




**TriPollar™  
Radyofrekans**

Kolajen üretimi ile sıkılaştırma.



**MIT™**

Manyetik infüzyon teknolojisi.

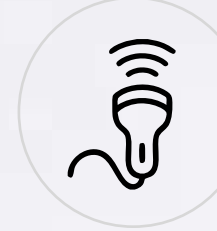

**Ultrasound**

Yüksek frekanslı dalgalarla cilt yenileme.



# UltraLift

## Yüz Germe + Cilt Sıkılaştırma + Vücut Şekillendirme +

UltraLift yüksek yoğunluklu Ultrason (MMFU) atışları ile ameliyatsız cilt kaldırma ve sıkılaştırma teknolojisi sağlar. Mikro ve Makro Odaklı çift başlığı ile değiştirilebilir 7 farklı cilt derinliğini hedef alabilir.




# UltraLift

CİLT BAKIM VE YENİLEME

## Mikro-Makro İleri Teknoloji

Ameliyatsız, ağrısız ve hızlı sonuçlar sunan UltraLift ile etkili sonuçlar sizi bekliyor.

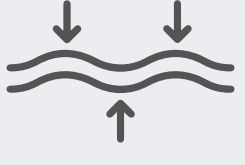

Katmanlı  
Lifting Teknolojisi



Yüksek  
Fokuslu Ultrason




Mikro-Makro  
Kişiyeye Özel Sistem



Hedef ısıtma ve  
kolajen uyarımı



Cerrahi Müdahale  
Gerektirmez.

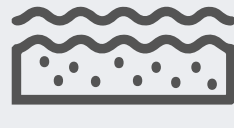


SMAS  
tabakasına etkisi

Enerji Tipi	Hi-Fu (Yüksek Yoğunluklu Ultrason)	
Güç	0.1J-3.0J (0.11J/STEP)	
Aralık	1200W	
Uzunluk	1 ~ 2mm (0.1mm/step)	
Çalışma Hızı	50/60Hz	
Ağırlık	35 kg	
Ölçüler	500 x 515 x 1310mm	
Başlıklar	L7-1.5 mm	L7-2.0 mm
	L7-3.0 mm	L7-4.0 mm
	L7-6.0 mm	L7-9.0 mm
	L7-13.0 mm	

Yüz Bölgesinde anti aging sağlar.

Vücutta dirençli adipositlerin doğal yolla elimine edilmesini sağlayan kasılmaları tetikler.

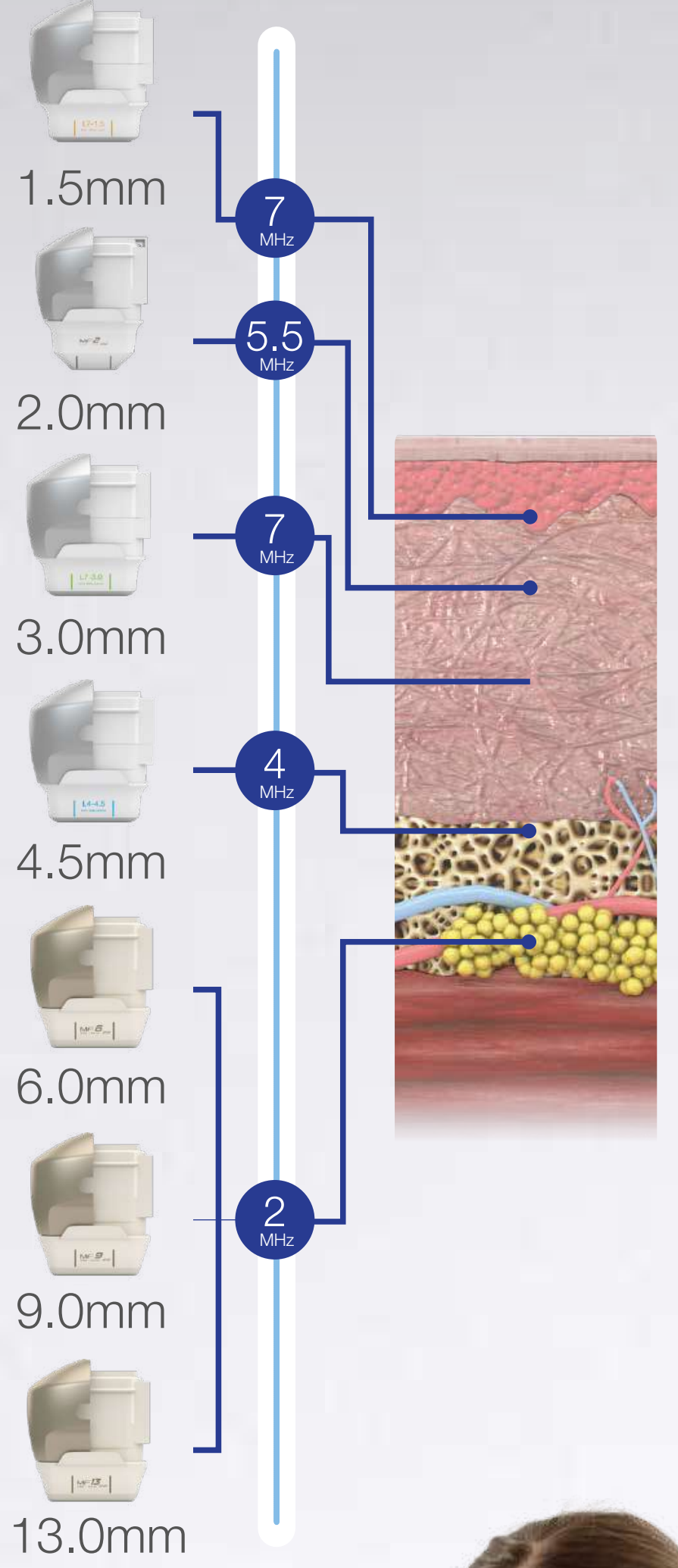

# PrimeX Porselen Yüz Germe

Odaklanmış termal enerji kolajen liflerini bozar. Kolajenin üçlü sarmal yapısı ısıdan etkilenecek şekilde çözülme süreci başlatılır. Doğal iyileşme süreci, fibroblastları yeni kolajen lifleri üretmeye teşvik eder. Tüm cilt tiplerine, her yaşta kişilere ve sınırlama olmaksızın her bölgeye uygulanabilir.



## Kanıtlanmış Klinik Sonuçları:

Kanıtlanmış klinik sonuçlarına göre;  
**Cilt kolajen üretiminde %25, Cilt elastikiyetinde ise %40 sıkılaşıma sonucu alınmıştır.**



Yüz Germe

Bölgesel İncelme

Selülit

Gıdı Toparlama

### PrimeX

1. Kontrollü ısıtma ve soğutma, enerjinin dokudaki çeşitli derinliklere iletilmesini sağlar.
2. Tedavi sırasında soğutmanın değiştirilmesi, derin dokuyu yüzeysel katmana kadar tedavi etmenize olanak sağlar.
3. Gerçek zamanlı sıcaklık izleme, doğru doku ısıtması için ek kontrol sağlar.
4. Aplikatör tasarımı, kullanıcının sıcaklığı kontrol etmesine ve tedavi parametrelerini ayarlamasına olanak tanır.



Uygulama anında, aplikatör ekranında, doku altında ki anlık ısı değişimini görüntüler.





GENOVA  
GOLDEN EFFECT

# Genova ile Kusurları Ortadan Kaldırın.

İşlem, epidermise zarar vermeden dermiste tedavi noktaları oluşturarak bu bölgelerin yeniden yapılanma ve onarım sürecine girmesini sağlar.





GENOVA  
GOLDEN EFFECT

CİLT BAKIM VE YENİLEME

## Altın iğne ile kusurları kaldırın.

Mikro iğne ve radyo frekans uygulamasının birleşimi olarak geliştirilen Genova Altın İğne, epidermis ve dermis problemlerinin giderilmesi konusunda etkili sonuçlar sunar.



MRF (81 iğne başlığı)




MRF (25 iğne başlığı)



MRF (49 iğne başlığı)

- Doku Kaybı Onarımı
- Kırışıklık Giderme
- Yara izleri Onarımı
- Geniş Gözenek Tedavisi
- Yüz ve Boyun Germe
- Vücut Sıkılaştırma
- Aşırı Terleme Tedavisi
- Yüz Çukurları Tedavisi


Mikro İğne Derinliği	0.1mm, 3,00 mm
Kartuş Tipi	Tek Kullanımlık
El Probu Kablo Uzunluğu	2.5 MT
Atım Süresi	10-900 ms
Mikro İğne Adedi	25-49-81

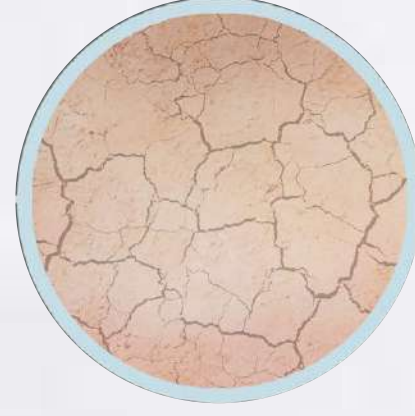

## Cilt Analiz Cihazı

# Çözüm Doğru Analiz ile Başlar


Yapay zeka görüntü tanıma yolu ile 15 cilt problemini tespit eder ve 360'dan fazla tedavi önerisi sunar.

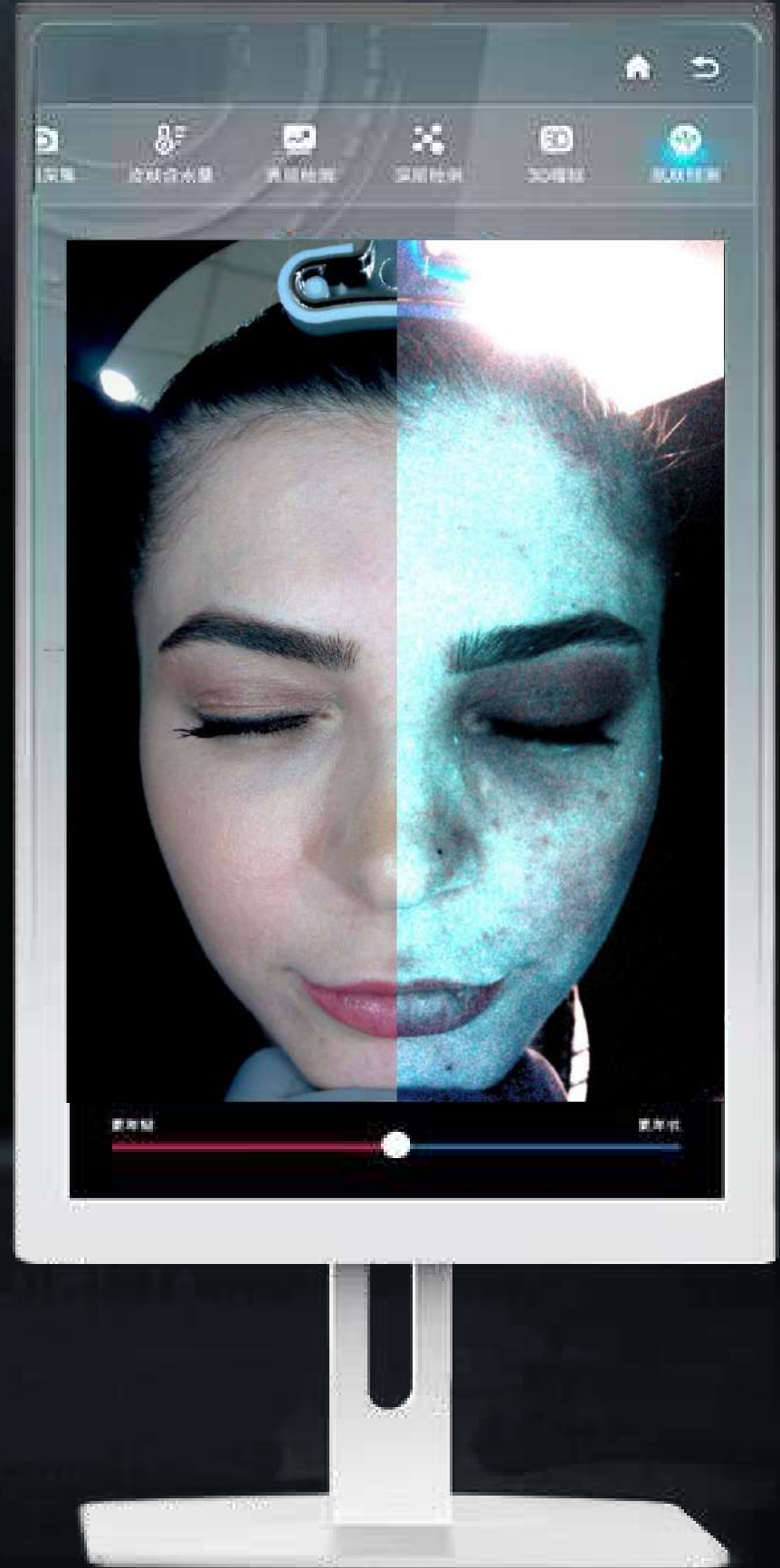

# Cilt Analiz Cihazı

ÇİLT BAKIM VE YENİLEME

## Derin Cilt Testi Raporu

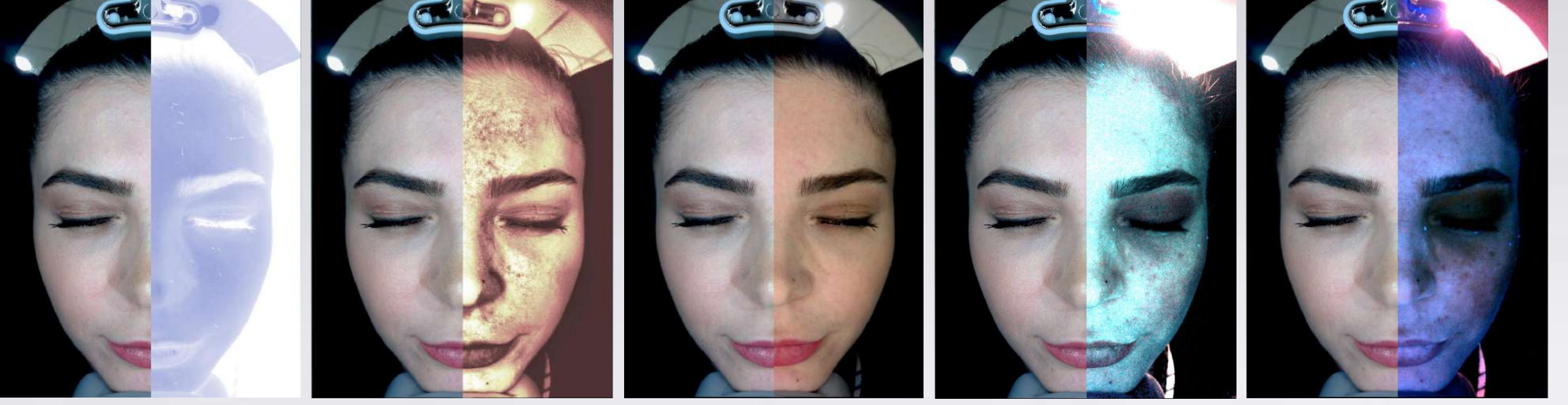

Kolajen lifi

Pigment

PL duyarlılığı


UV Spotu

UV aknesi

Teknoloji	8. Spektrum Görüntüleme
Analiz	14 Faktörlü Cilt Analizi
Güvenlik	40 Adet Koruyucu Filtre
Wi-Fi	Pc-Tablet Bağlantısı
Modül	10 Farklı Modül
Ekran	4K HD 1920x1080 Çözünürlük
Voltaj	AC 220V - 50 Hz
Cihaz Garantisi	2 Yıl

Yapay zeka görüntü tanıma yoluyla en yaygın 9 cilt problemini tespit eder ve 360'tan fazla tedavi önerir. Genel cilt analizi, sivilce ve akne analizi, leke analizi, siyah nokta analizi, gözenek tespiti, kırışıklık tespiti, cilt hassasiyeti ve cilt yaşını size gösterir.


## Cilt Yüzeyi Test Raporu

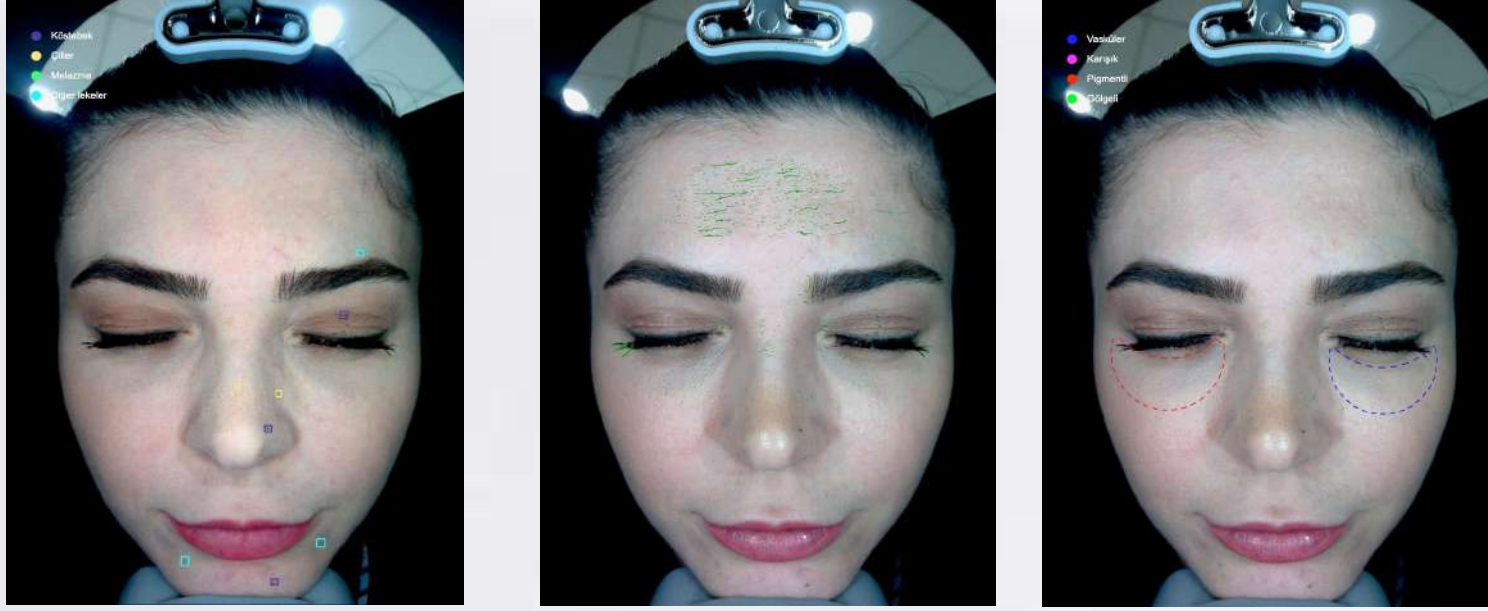

Lekeler

Kırışıklıklar

Koyu Halkalar

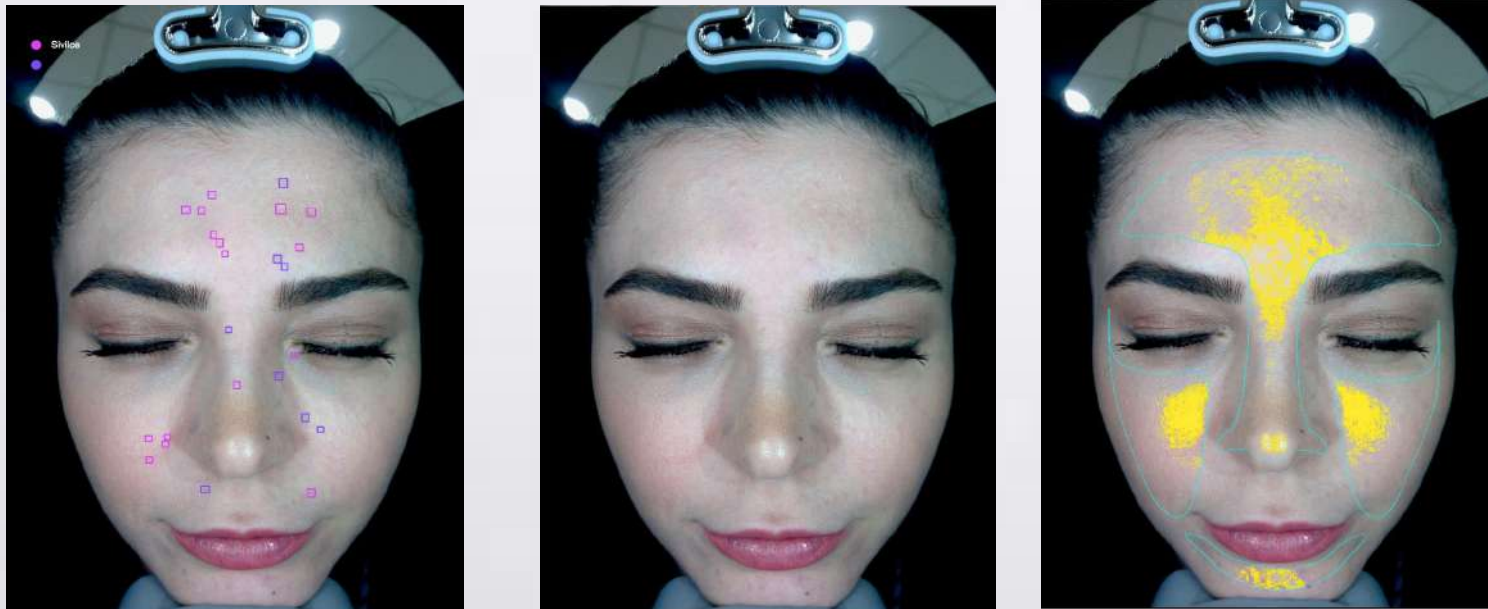

Akne


Ten Rengi

Sebum



Gözenekler

Siyah Noktalar

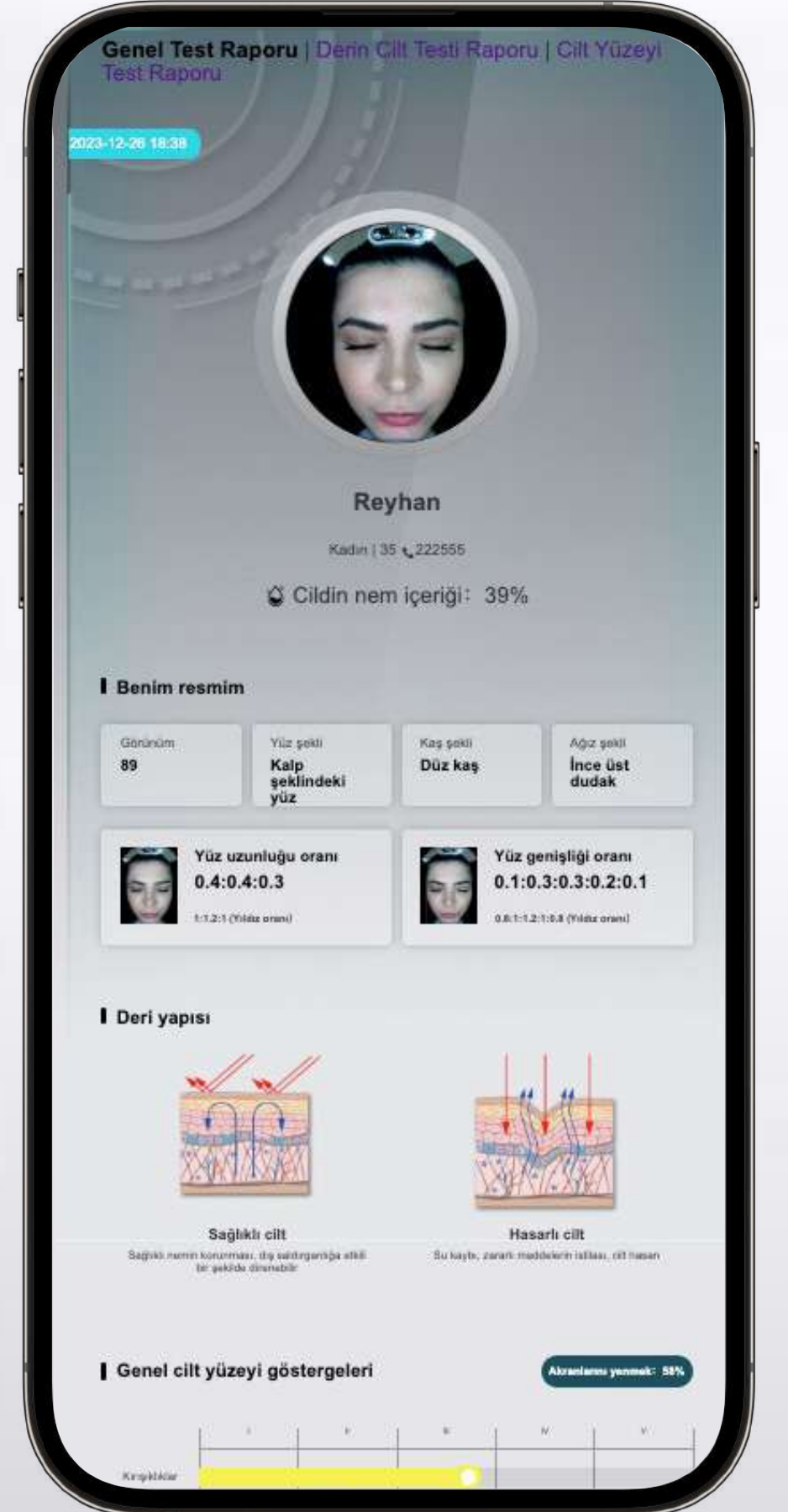

\*Anında telefona aktarım.

# Ameliyatsız Yüz Germe.

Gelişmiş Hi-Fu bağ dokularında bulunan yoğun smas dokusunu hedef olarak odaklanmış ultrasonik lazer teknolojisi ile hedef bölgede ısı oluşturur. Mevcut bölgedeki ısıdan etkilenen SMAS doku yapısında etkili sıkılaşma meydana gelir.



## Ameliyatsız Yüz Germe

Yaşlanmaya ve dış faktörlere bağlı özellikle yüz bölgelerindeki kaslarda iskelet görevi gören aponevroz dokusunun bozulması ve işlevini kaybetmesi sonucunda kas dizilimlerinde oluşan orantısızlık, ciltte kırışıklık görüntüsü meydana getirmektedir.

Hi-fu cerrahi ve enjeksiyon gerektirmeden, cilt yüzeyinde herhangi bir olumsuz etki bırakmadan kırışıklık ve lifting tedavilerinde oldukça başarılıdır.



Teknoloji	Odaklanmış Ultrasonik Ses Dalgası
Başlık	5 Adet
Ekran	15 inc Ultra HD Dokunmatik Ekran
Güç	800 W
Voltaj	110-240V 50/60 Hz
Cihaz Garantisisi	2 Yıl

1. Kırışıklık Tedavisi
2. Yüz Sıkılaştırma
3. Kaş Kaldırma
4. Gıdı Bölgesi Toparlama
5. Cilt Elastikiyetini Arttırma
6. Vücut Liftingi
7. Bölgesel incelme ve Şekillendirme



1,5mm



3,00mm



4,5mm




8.0mm



13.0mm



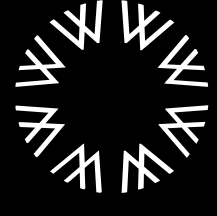

**MEDSATEK**  
MEDİKAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

# Bölgesel İnceleme

Showroom

İzmir

İstanbul

Kıbrıs

# SCULPTURE

## İlk Seansta Gözle Görülür Sonuçlar için.

Sculpture, kanıtlanmış bölgesel incelme teknolojilerini tek cihazda birleştirerek yağ hücrelerinin vücuttan atılmasını sağlar.



## 3D Vacuum + KaviSculp Teknolojisi

SCULPTURE Heykeltraş birden fazla zayıflama teknolojisinin tek bir cihazda birleştiği yeni nesil bölgesel incelme cihazıdır.

Zayıflama teknolojisinin geldiği bu son sistemde tamamen ağrısız ve acısız olan bu uygulamada seanstan hemen sonra **6-15 cm** arası incelme sonucu alınabilir.



### 3D Vacuum (Heykeltraş)

1. Vakum ve moleküler ısıtma uygulanır.
2. Yağ hücrelerinin yapısı bozulur.
3. Yapısı bozulan yağ hücreleri lenf kanallarına itilir.



### Geniş Bölge RF

Ani basınç değişiklikleri ile yağ hücrelerinin yağ çeperlerini tahrib ederek yağ moleküllerinin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

### Jade Başlığı

Vücudun yağ oluşumu yaşayan bölgesinin lenf kanallarının yavaş çalışmasının sebep olduğu biyolojik stres bozukluğunu azaltmak için kullanılır.



### Orta Genişlikte Bölge RF

Ani basınç değişiklikleri ile yağ hücrelerinin yağ çeperlerini tahrib ederek yağ moleküllerinin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

### KaviSculp

Yüksek frekanslı ses dalgaları ile yağ hücrelerini serbest sıvı haline getirir.



### Gıdı ve Yüz RF

Yayılan ısı ve basınç ile yüz, boyun ve dekolte bölgesinde yeni kolajen üretimini aktifleştirir.

Kavisculp	80 HZ
1.Başlık	KaviSculp
2.Başlık	Vacuum 3D
3.Başlık	6 Pin RF
4.Başlık	4 Pin RF
5.Başlık	3 Pin RF
6.Başlık	Jade Body Antistress
Ekran	10.4 Ultra HD Touch
Cihaz Garantisi	2 Yıl



**EMSLiM**Fit

30 Dakikada,  
30.000 Mekik  
34 Antrenman

EmSlimFit, kasları elektriksel manyetik simülasyon yöntemiyle uyararak, kasların en yüksek seviyede kasılmasını sağlar. Bu kasılmalarla kaslar doğal gelişim sürecine girip daha sert, daha güçlü ve daha sıkı hale gelir.




## Kusursuz Elektromanyetik Dalgalar

EMSLiMFit, gerçek fiziksel antrenman ile elde edilmesi çok zor ve uzun yıllar alabilecek yoğunlukta egzersiz sonucu sunar. Hedeflenen kas ya da kas grubu üzerinde odaklı olarak çalışır.

### EmSlimFit neden çok popüler?

- 1.Kas gelişimini sağlarken, yağ yakımını hızlandırır.
- 2.Duruş bozukluklarını düzenler.
- 3.Kitle vücut endeksini sağlıklı düzeye getirir.
- 4.Metabolizmayı hızlandırır.
- 5.Diyetisyenler, spor salonları, güzellik salonları, klinik ve hastanelerde kullanılmaktadır.

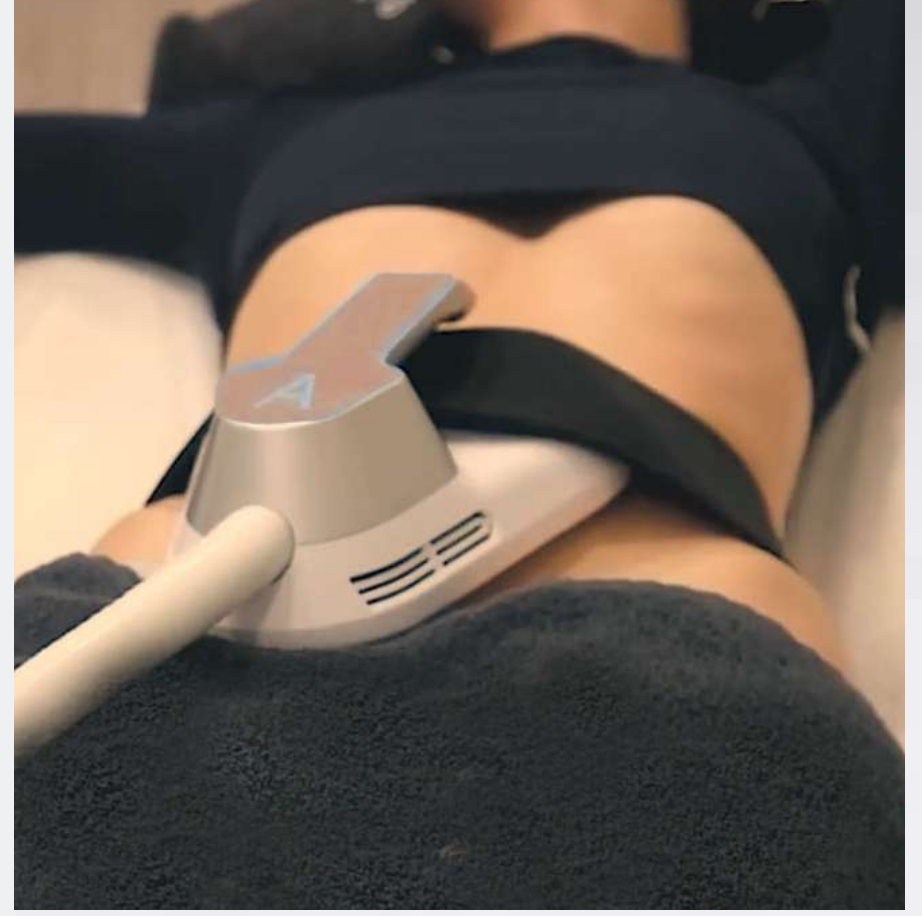


Başlık Sayısı	2 Başlık
Manyetik Dalga	2400W
Ekran	10.4 inch dijital dokunmatik ekran
Voltaj	110-240V 50/60 Hz
Cihaz Garantisi	2 Yıl




Sağlığınız için  
%100 Güvenli



Sıkılaştırma  
Teknolojisi

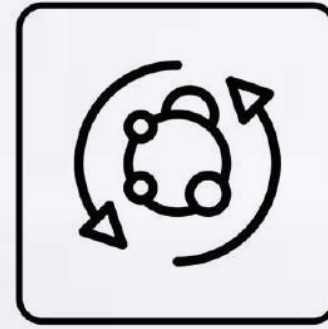

Metabolizmayı  
Hızlandırır

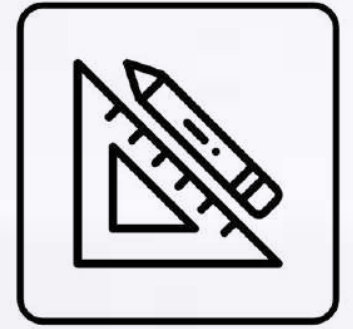

Bölgesel  
Şekillendirme



# EMSLiM4 Fit

## EmslimFit artık 2 Kat Daha Hızlı... 30.000 Mekik Etkisi

EmSlim4, kasları elektriksel manyetik simülasyon yöntemiyle uyararak, kasların en yüksek seviyede kasılmasını sağlar. Bu kasılmalarla kaslar doğal gelişim sürecine girip daha sert, daha güçlü ve daha sıkı hale gelir.



### Kusursuz Elektromanyetik Dalgalar

EMSlimFit, gerçek fiziksel antrenman ile elde edilmesi çok zor ve uzun yıllar alabilecek yoğunlukta egzersiz sonucu sunar. Hedeflenen kas ya da kas grubu üzerinde odaklı olarak çalışır.

#### EmSlimFit neden çok popüler?

1. Aynı anda kas inşa ederken yağ yakımı sağlar.
2. Günde 8+ seans alınabilir – hızlı yatırım dönüşü.
3. Karnı, kalça, kol ve bacak gibi birden fazla bölgeye uygulanabilir.
4. Ağrısız, non-invaziv uygulama
5. Doğal Görünümlü Vücut Şekillendirme


Başlık Sayısı	4 Başlık
Manyetik Dalga	2400W
Ekran	10.4 inch dijital dokunmatik ekran
Voltaj	110-240V 50/60 Hz
Cihaz Garantisi	2 Yıl




Sağlığınız için  
%100 Güvenli



Sıkılaştırma  
Teknolojisi

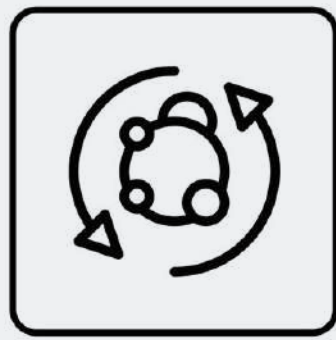

Metabolizmayı  
Hızlandırır

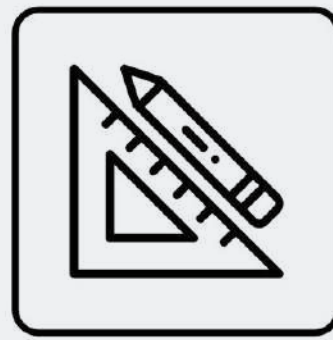

Bölgesel  
Şekillendirme



360° Cryolipolysis Tech  
**Cryo** frozen

# 360° Derece CryoLipoliz Teknolojisi

CryoFrozen 360°, soğutma teknolojisi ve beş farklı aplikatörü sayesinde neredeyse tüm vücut bölgelerinde etkili sonuçlar sunar.



## 360° Teknolojisi

CryoFrozen 360°'in geniş soğutma aplikatörleri, farklı vücut bölgelerine uyacak şekilde en etkili sonucu alabilmek için tasarlanmıştır.

Her bir aplikatör, vücut şekillendirme için yağ hücrelerini etkili bir şekilde dondurur. Farklı protokoller ile uyum sağlayarak istenilen sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılır.



Geniş Başlık 1

Geniş Başlık 2



Orta Başlık 1




Orta Başlık 2



Gıdı Başlığı

Başlık Sayısı	5 Farklı Başlık
Güç	2000W
Negatif Baskı	0-90Kpa
Soğutma	-20°
Ekran	10.4 inch dijital dokunmatik ekran
Cihaz Garantisi	2 Yıl

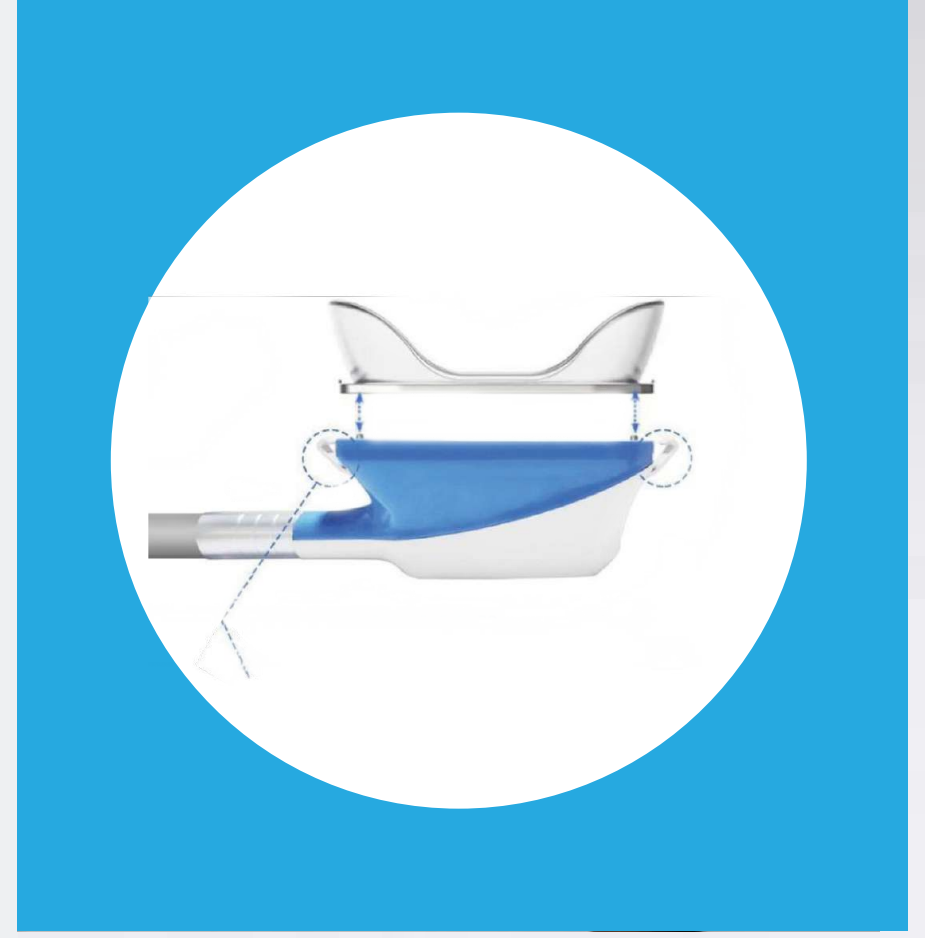

Aplikatör önündeki plastik aparatlar değişerek, bölgeye olan oturmasını kusursuz hale getirir. Konforlu ve verimli uygulama sağlar.



## Lenf Drenaj

Lenf atımının yeterli sağlanamaması ödem oluşmasına sebep olmaktadır. Lenfatik drenaj, düzenli aralıklarla basınç uygulayarak vücudun doğal yolla yetersiz kaldığı lenfatik (akkan) sistemdeki bozukluktan dolayı atılamayan lenf sıvısının boşaltılmasını sağlar.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA



## G5 Cihazı

İterek ve sıkıştırma yöntemi ile selülitli bölgelerdeki portakal kabuğu görüntüsünde gözle görülür azalma sağlayan G5 masajı aynı zamanda bölgesel zayıflama etkisini artırmaktadır.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA



## Pasif Jimnastik

Pasif jimnastik, kişinin kaslarına düşük voltaj dalgaları vererek kasların çalışmasını ve anlık kas gerilimini sağlar.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA



## İğneli Epilasyon

EPİLASYON

Flash ve termoliz sistemleri bulunan iki sistem iğneli epilasyon cihazıdır.

Voltaj	200V
Frekans	50-60 Hz
Power	500W
Amper	1A
Çıkış Frekans	1.3 Mhz



## Kameralı Analiz

CİLT BAKIM VE YENİLEME

Cilt derisi, saç folikülleri 1000 kat büyütürken uzmanın çözüm için gerekli analizi daha doğru yapmasını sağlar.



## Plazma Pen


## Derma Pen



Plazma teknolojisi, ben ve lekelerin tedavisi için kullanılmaktadır.

Yüz, saç ve boyun bölgesindeki problemleri dokunun onarılmasını ve cildin yeniden yapılanmasını sağlar.



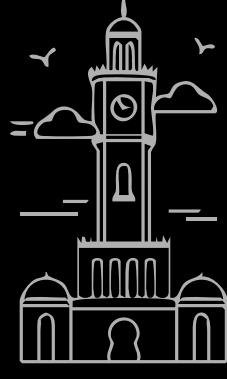

İzmir İstanbul Kıbrıs

MEDSATEK Showroom'larına  
Davetlisiniz...

**Bayraklı/İzmir**

Mansurođlu, Ankara Cd. NO:47 D:704 KAT:7  
Mavi Plaza

**Küçükçekmece/İstanbul**

Halkalı Merkez, Dereboyu Cd. No:56/9  
Küçükçekmece/İstanbul

**Lefkoşa/Kıbrıs**

59P2+28R, Mehmet Akif Cad.  
Büyük Reşit Sk.